

## DISTILLATEUR D'EAU




**Le distillateur d'eau** MHC produit de l'eau parfaitement pure par distillation. L'appareil chauffe l'eau à 100°C qui s'élève en vapeur vers le condenseur.

L'ébullition tue les bactéries, les virus et autres micro-organismes présent dans l'eau, tandis que les matériaux (solides ou liquides, tels que calcaire, pesticides...) restent dans le réservoir.

Dans le serpentin de condensation, la vapeur se retransforme en eau, avant de passer par un second nettoyage à travers un filtre à charbon actif.

**La sécurité pour les DAC  
ou les autoclaves**

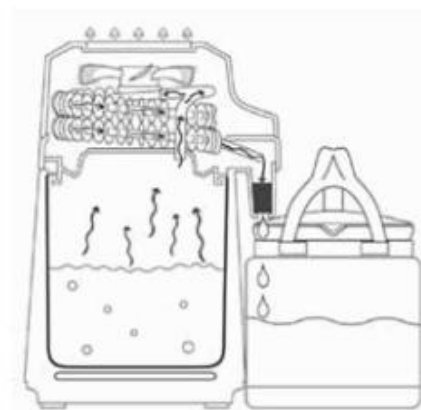

### Distillateur d'eau

Alimentation	AC 230V - 50 Hz
Puissance	750 W
Capacité	4L
Distillation	0,7 à 1L/h
Température de sécurité	160°
Poids	4 Kg

Référence	Désignation	€ T.T.C.
MHC400	DISTILLATEUR	249,00
MHC400A	Charbon actif	16,00
MHC400B	Détartrant	20,00